Оценка степени пролиферации вагинального

І степень пролиферации (П-1).В мазках преобладают промежуточные клетки (до 90%) и обнаруживаются (до 10%) поверхностные клетки с крупными ядрами, окрашивающимися в базофильные тона, и небольшое число лейкоцитов. При нормальном менструальном цикле мазки этого типа встречаются в первые дни его.

II степень пролиферации (П-II). В мазках обнаруживается равное количество поверхностных и промежуточных клеток. КИ колеблется от 1 до 30%, ЭИ - от 1 до 20%. Мазки типа П-III встречаются в раннюю фолликулиновую фазу нормального менструального цикла.



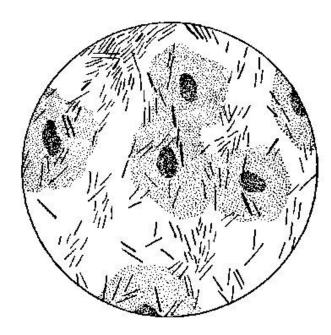


Рис. 6. I степснь чистоты влагалищного севрста (по R. Schroeder'y).

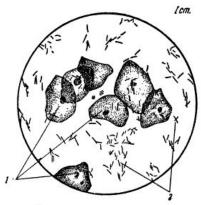

Первая степень чистоты влагалищного содержимого. В препарате клетки эпителия слизистой влагалища (1) влагалищные палочки Додерлейна (2).

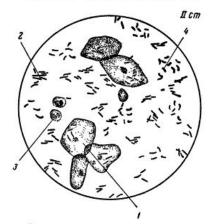

Вторая степень чистоты влагалищного содержимого. Видны эпителиальные клетки (1) и смешанная флора: влагалищные палочки (2), отдельные лейкоциты (3), comma variabile (4).